

Εγχειρίδιο χρήσης

PlateMate, GroinMate & CableMate

Αναθεώρηση 6 · Τελευταία αναθεώρηση: 12 Οκτωβρίου 2026

Κατασκευαστής: CC Athletics ApS, Groenloekkevej 6H, 5000 Odense C, Denmark

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Σχετικά με εμάς
3. Σημαντική σημείωση ασφάλειας
4. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
5. Γενικές συνθήκες λειτουργίας
6. Βαθμονόμηση
7. Επισκόπηση προϊόντων
 - 7.1 PlateMate
 - 7.2 GroinMate
 - 7.3 CableMate
8. Πρώτα βήματα
9. Αντιμετώπιση προβλημάτων
10. Νομικές πληροφορίες και εγγύηση
11. Συμμόρφωση
12. Επικοινωνία και υποστήριξη

Ο παρών οδηγός αφορά τα προϊόντα της CC Athletics. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν ανήκουν στην CC Athletics και προορίζονται αποκλειστικά για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού της CC Athletics. Σημειώνεται ότι το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να ενημερωθεί. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση ccathletics.com/manual.

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της CC Athletics. Η τεχνολογία μας έχει σχεδιαστεί για να βοηθά φυσικοθεραπευτές, αθλητικές ομάδες και επαγγελματίες της αθλητικής απόδοσης να συλλέγουν ακριβή και επαναλήψιμα δεδομένα γρήγορα και αποτελεσματικά. Το παρόν εγχειρίδιο συνδυάζει τις πρωτότυπες οδηγίες με επικαιροποιημένες προδιαγραφές, πληροφορίες συμμόρφωσης και οδηγίες χρήσης από τις πιο πρόσφατες σειρές προϊόντων μας.

Ελάχιστες απαιτήσεις: υπολογιστής με macOS ή Windows.

2. Σχετικά με εμάς

Η CC Athletics είναι μια δανική εταιρεία που αναπτύσσει πλατφόρμες δύναμης και εξοπλισμό ισομετρικών μετρήσεων για την παρακολούθηση αθλητών.

3. Σημαντική σημείωση ασφάλειας

⚠ Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. Αυτοί ονομάζονται υπολειπόμενοι κίνδυνοι.

Παραδείγματα υπολειπόμενων κινδύνων:

- **Ανατροπή:** Οι πλατφόρμες δύναμης ενδέχεται να ανατραπούν αν τοποθετηθούν σε ανώμαλη επιφάνεια, με πιθανό αποτέλεσμα τον τραυματισμό.
- **Ολίσθηση:** Αν οι χρήστες φορούν ολισθηρά υποδήματα ή ρούχα ή είναι ξυπόλυτοι, ενδέχεται να γλιστρήσουν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, με αποτέλεσμα πτώσεις και τραυματισμό. Τα προϊόντα μπορεί επίσης να γλιστρήσουν αν δεν τοποθετηθούν σε αντλιοσθητική επιφάνεια.
- **Δομική ακεραιότητα:** Η πτώση των προϊόντων ή η άσκηση υπερβολικής δύναμης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα βλάβη του εξοπλισμού ή τραυματισμό.
- **Βλάβη του δέρματος:** Η άμεση επαφή με μεταλλικές ακμές ή οι απότομες κινήσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας μπορεί να προκαλέσουν εκδορές ή άλλους τραυματισμούς.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Ασθενείς με σοβαρή οστεοπόρωση
- Ασθενείς με κατάγματα
- Μην χρησιμοποιείτε σε χώρους με ολισθηρά δάπεδα
- Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει
- Μην χρησιμοποιείτε αν το προϊόν έχει τροποποιηθεί
- Να μην χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν του ενδεδειγμένου

Σημαντική αποποίηση ευθύνης: Δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν

Τα προϊόντα της CC Athletics δεν είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Προορίζονται αποκλειστικά για την παρακολούθηση των επιδόσεων, δοκιμασίες δύναμης και αξιολογήσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Τα προϊόντα αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί για τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ίαση ή την πρόληψη οποιασδήποτε νόσου ή ιατρικής πάθησης. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα αυτά σε οποιοδήποτε κλινικό περιβάλλον ή περιβάλλον αποκατάστασης, συμβουλευτείτε πάντα έναν καταρτισμένο επαγγελματία υγείας.

4. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Σημαντικές οδηγίες χειρισμού:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο σε επίπεδες, σταθερές επιφάνειες.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες που κατανοούν τη χρήση και τους περιορισμούς της.
- Χρήστες με σωματικές ή γνωστικές αναπηρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα, παρά μόνο υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένου επαγγελματία.
- Δεν είναι γνωστό ότι οι συσκευές αυτές περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη, απευθυνθείτε στην τοπική υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων. Όπου υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης, πρέπει να γίνεται ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε τις συσκευές με αποτέφρωση.
- Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες.
- Οι συσκευές μέτρησης είναι ευαίσθητα όργανα. Αποφεύγετε να τις ρίχνετε, να τις χτυπάτε ή να τις υποβάλλετε σε οποιαδήποτε κρούση. Χειρίζεστέ τις με προσοχή. Οι πτώσεις ή οι απότομες κρούσεις μπορεί να καταστήσουν αναγκαία την επαναβαθμονόμηση.
- Οι συσκευές και τα παρελκόμενά τους παρέχονται μη αποστειρωμένα και δεν μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο ή με άλλες μεθόδους αποστείρωσης. Μην επιχειρήσετε αποστείρωση σε αυτόκαυστο.
- Αποφεύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες ή την υψηλή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα καλώδια και πηγές τροφοδοσίας.
- Η αποσυναρμολόγηση ή η τροποποίηση της συσκευής με μη εγκεκριμένα παρελκόμενα ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση.
- Μην μετακινείτε τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.
- Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε τις συσκευές CC Athletics σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

5. Γενικές συνθήκες λειτουργίας

- Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους υπό ξηρές συνθήκες. Οι συσκευές CC Athletics μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά μόνο υπό ξηρές συνθήκες και πάνω σε επίπεδη και σταθερή βάση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει άφθονος ελεύθερος χώρος γύρω σας όταν τις χρησιμοποιείτε.
- Ρυθμίστε το ύψος των ρυθμιζόμενων ποδιών ώστε η συσκευή να είναι οριζοντιωμένη. Η τοποθέτηση της συσκευής σε μη επίπεδη επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα και, στη χειρότερη περίπτωση, σε τραυματισμούς.
- Θερμοκρασία: -10 °C έως 40 °C (αποθήκευση, συσκευασία και μεταφορά), 0 °C έως 50 °C (λειτουργία).
- Υγρασία: 30% έως 75%.
- Αποθήκευση: Φυλάσσετε τα προϊόντα σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Συντήρηση: Τα προϊόντα δεν έχουν απαιτήσεις για προγραμματισμένη συντήρηση ή σέρβις.




6. Βαθμονόμηση

Όλες οι συσκευές είναι εργοστασιακά βαθμονομημένες. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας: support@ccathletics.dk

7. Επισκόπηση προϊόντων

Χαρακτηριστικό	PlateMate	GroinMate	CableMate
Σκοπός	Δοκιμασίες αλμάτων & ισομετρικές δοκιμασίες	Ισομετρική δοκιμασία προσαγωγής/απαγωγής της βουβωνικής περιοχής	Ισομετρική δοκιμασία
Διαστάσεις	50 × 35 × 8 cm	60 × 40 × 16 cm	Συμπαγής
Βάρος	9,8 kg ανά πλατφόρμα	5,4 kg	0,7 kg
Μέγιστο φορτίο	4.000 kg ανά πλατφόρμα (1.000 kg ανά δυναμοκυψέλη)	200 kg	200 kg
Ακρίβεια	±0,15 N	±0,1 N	±0,15 N
Συχνότητα δειγματοληψίας	960 Hz	960 Hz	~1.000 Hz
Εφαρμογές	CMJ, SJ, DJ, άλματα rogo, ισορροπία & ισομετρικές δοκιμασίες	Ισομετρική δοκιμασία	Ισομετρική δοκιμασία
Μετρούμενες παράμετροι	ccathletics.com/what-we-measure		
Τροφοδοσία	Τροφοδοσία μέσω USB	Τροφοδοσία μέσω USB	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (USB-C)
Χρόνος λειτουργίας	Συνεχής τροφοδοσία μέσω USB	Συνεχής τροφοδοσία μέσω USB	~8 ώρες ανά φόρτιση
Λογισμικό	ForceMate (Windows/macOS)	ForceMate (Windows/macOS)	ForceMate (Windows/macOS)

Χαρακτηριστικό	PlateMate	GroinMate	CableMate
Τάση εισόδου	5 V	5 V	5 V
Ρεύμα	~400 mA	~140 mA	~500 mA
Τύπος σύνδεσης 1	USB-B	USB-B	USB-C
Τύπος σύνδεσης 2	RJ11		
Εύρος θερμοκρασίας	0-50 °C	0-50 °C	0-50 °C

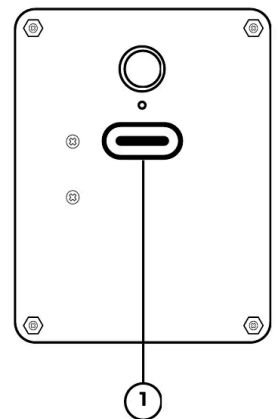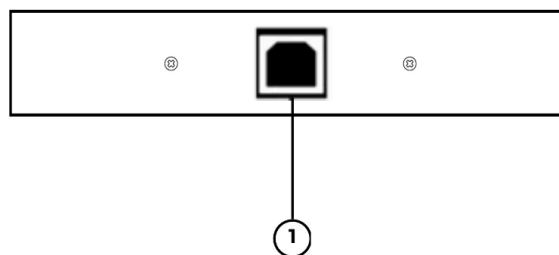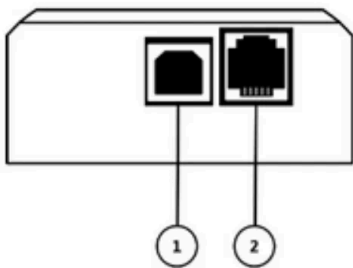

Συνδέσεις, από αριστερά προς τα δεξιά: PlateMate, GroinMate, CableMate.

7.1 PlateMate

Το PlateMate είναι ένα σύστημα διπλής πλατφόρμας δύναμης για την αξιολόγηση κινήσεων. Επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αντικειμενικές μετρήσεις.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων φυσικοθεραπευτές, αθλητικοί προπονητές και επαγγελματίες υγείας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επίβλεψη από μη εκπαιδευμένα άτομα ή από άτομα με γνωστικές αναπηρίες.

Κατάλληλο για χρήστες ηλικίας 8 ετών και άνω. Οι χρήστες κάτω των 18 ετών πρέπει πάντα να βρίσκονται υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένου επαγγελματία. Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να ακολουθούν οδηγίες. Δεν συνιστάται για άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες σωματικές ικανότητες.

Κάθε πλατφόρμα είναι εξοπλισμένη με 4 ηλεκτρονικές δυναμοκυψέλες, η έξοδος των οποίων μπορεί να καταγραφεί στον υπολογιστή σας μέσω του λογισμικού μας ForceMate.

Χρήση: Κατεβάστε το λογισμικό μας ForceMate από τον ιστότοπό μας για να καταγράφετε και να απεικονίζετε τα δεδομένα από τις πλατφόρμες. Στον ιστότοπο θα βρείτε επίσης εκπαιδευτικά βίντεο και οδηγούς. Οι πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή μαζί. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ των πλατφορμών για να τις χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία διπλής πλατφόρμας. Σημειώστε ότι, κατά την εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας μονής και λειτουργίας διπλής πλατφόρμας, το καλώδιο USB πρέπει να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί ξανά, ώστε να γίνει επαναφορά των πλατφορμών και να αναγνωρίσουν αν είναι συνδεδεμένη άλλη πλατφόρμα.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 2× Πλατφόρμα δύναμης
- 1× Καλώδιο USB-B σε USB-C
- 1× Καλώδιο σύνδεσης πλατφορμών

7.2 GroinMate

Το GroinMate είναι μια συσκευή ελέγχου της δύναμης προσαγωγής και απαγωγής. Επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αντικειμενικές μετρήσεις.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων φυσικοθεραπευτές, αθλητικοί προπονητές και επαγγελματίες υγείας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επίβλεψη από μη εκπαιδευμένα άτομα ή από άτομα με γνωστικές αναπηρίες.

Κατάλληλο για χρήστες ηλικίας 8 ετών και άνω. Οι χρήστες κάτω των 18 ετών πρέπει πάντα να βρίσκονται υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένου επαγγελματία. Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να ακολουθούν οδηγίες. Δεν συνιστάται για άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες σωματικές ικανότητες.

Χρήση: Κατεβάστε το λογισμικό μας ForceMate από τον ιστότοπό μας για να καταγράφετε και να απεικονίζετε τα δεδομένα από το GroinMate. Συνδέστε το GroinMate στον υπολογιστή και ξεκινήστε τις δοκιμασίες.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1× GroinMate
- 1× Καλώδιο USB-B σε USB-C

7.3 CableMate

Το CableMate είναι μια ευέλικτη συσκευή που σας επιτρέπει να μετράτε την παραγόμενη δύναμη πολλών διαφορετικών μυϊκών ομάδων. Επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αντικειμενικές μετρήσεις.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων φυσικοθεραπευτές, αθλητικοί προπονητές και επαγγελματίες υγείας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επίβλεψη από μη εκπαιδευμένα άτομα ή από άτομα με γνωστικές αναπηρίες.

Κατάλληλο για χρήστες ηλικίας 8 ετών και άνω. Οι χρήστες κάτω των 18 ετών πρέπει πάντα να βρίσκονται υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένου επαγγελματία. Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να ακολουθούν οδηγίες. Δεν συνιστάται για άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες σωματικές ικανότητες.

Χρήση: Κατεβάστε το λογισμικό μας ForceMate από τον ιστότοπό μας για να καταγράφετε και να απεικονίζετε τα δεδομένα από το CableMate. Συνδέστε το CableMate ασύρματα στον υπολογιστή και ξεκινήστε τις δοκιμασίες.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1× CableMate
- 1× Καλώδιο USB-C
- 1× Σκληρή θήκη μεταφοράς
- 2× Καραμπίνερ
- 1× Ιμάντας 1 m για δοκιμασίες έλξης
- 1× Ιμάντας 2 m για δοκιμασίες έλξης

Ασφάλεια μπαταρίας και κανονισμοί για το CableMate

Προδιαγραφές μπαταρίας

Το CableMate περιέχει πακέτο μπαταρίας πολυμερούς λιθίου (LiPo):

- Μοντέλο: 503450
- Τάση: 3,7 V
- Χωρητικότητα: 1.000 mAh

⚠ Προειδοποιήσεις ασφαλείας για την μπαταρία

- Κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης: Μην τρυπάτε, μη συνθλίβετε και μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην την εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C (140 °F).
- Φόρτιση: Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB-C και εγκεκριμένους προσαρμογείς φόρτισης.
- Ζημιά από νερό: Διατηρείτε τη θήκη της μπαταρίας στεγνή. Η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Φυσική ζημιά: Αν η συσκευή πέσει ή υποστεί ζημιά, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με την CC Athletics.
- Διόγκωση: Αν η μπαταρία φαίνεται διογκωμένη ή το περίβλημα της συσκευής έχει φουσκώσει, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Θερμότητα: Αν η συσκευή θερμανθεί ασυνήθιστα κατά τη φόρτιση ή τη χρήση, αποσυνδέστε την αμέσως.

Απόρριψη και ανακύκλωση μπαταρίας

- Μην την απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης μπαταριών ή σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών που δέχονται μπαταρίες λιθίου.
- Στην ΕΕ, η απόρριψη πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία WEEE 2012/19/ΕΕ.
- Επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων για τα κατάλληλα σημεία απόρριψης.
- Καλύψτε με ταινία τους πόλους της μπαταρίας πριν από την απόρριψη, για να αποτραπούν βραχυκυκλώματα.

8. Πρώτα βήματα

Ακολουθήστε τους οδηγούς γρήγορης εκκίνησης στη διεύθυνση ccathletics.com/getting-started.

Πριν από τη χρήση των πλατφορμών δύναμης:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ρυθμιζόμενα πόδια έχουν ρυθμιστεί ώστε οι πλατφόρμες δύναμης να είναι οριζόντιες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από τη συσκευή είναι ελεύθερος, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.

Πριν από τη χρήση όλων των προϊόντων:

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από τη συσκευή είναι ελεύθερος, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών.

Κάθε συσκευή διαθέτει μια θύρα (1) για σύνδεση με τον υπολογιστή σας. Η PlateMate διαθέτει μια θύρα σύνδεσης (2) για σύνδεση με την άλλη πλατφόρμα μέσω του καλωδίου σύνδεσης. Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή εμφανίζεται πάντα ως η αριστερή συσκευή στο λογισμικό.

Οι GroinMate και PlateMate τροφοδοτούνται αποκλειστικά μέσω του καλωδίου USB. Μόλις συνδεθούν, οι συσκευές ενεργοποιούνται εντός 10 δευτερολέπτων. Η CableMate λειτουργεί με μπαταρία. Φροντίστε να τη φορτίζετε συχνά, ώστε η μπαταρία να διατηρείται σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο διάστημα.

Είναι σημαντικό να παραμένετε ακίνητοι για τουλάχιστον 2–5 δευτερόλεπτα πριν από την εκτέλεση άλματος στις πλατφόρμες δύναμης, καθώς και μεταξύ των αλμάτων. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή δεδομένα.

⚠ Προειδοποίηση: Όσο η συσκευή σας συνδέεται, μην ασκείτε φορτίο στη συσκευή, μην πατάτε πάνω στη συσκευή, μην μετακινείτε τη συσκευή και μην ασκείτε δύναμη στη συσκευή.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν εντοπίζεται	Επανεκκινήστε το λογισμικό και ελέγξτε ξανά τη σύνδεση του καλωδίου.
Ακανόνιστα δεδομένα ή καθόλου δεδομένα	Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη και ότι δεν υπάρχει κίνηση κατά την εκκίνηση. Εκτελείτε ισομετρική δοκιμασία; Φροντίστε να ρυθμίσετε το ελάχιστο κατώφλι στο ForceMate. Για εκπαιδευτικά βίντεο, δείτε το κανάλι μας στο YouTube: youtube.com/@ccathletics
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Επαναφορτίστε τη συσκευή (CableMate) ή ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου (PlateMate & GroinMate).
Προβλήματα λογισμικού	Επανεγκαταστήστε το λογισμικό ή ελέγξτε τη συμβατότητα του συστήματος. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε κατεβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση.
Προβλήματα με το CableMate	Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αν παρουσιαστούν δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της CC Athletics για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με την CC Athletics.

⚠ Προειδοποίηση:

Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και τις συστάσεις του. Η μη τήρηση αυτής της απαίτησης μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα προϊόντα. Οι κινήσεις που προτείνει η CC Athletics μπορεί να συνδέονται με κινδύνους τραυματισμού.

Συμβουλευέστε τακτικά τον ιστότοπο της CC Athletics για τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αντενδείξεις, κινδύνους ή παρενέργειες που αφορούν το PlateMate. Η CC Athletics δεν παρέχει θεραπευτικές συμβουλές ούτε οποιαδήποτε ιατρική διάγνωση.

Εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, είστε τραυματισμένοι ή βρίσκεστε σε ευαίσθητη κατάσταση υγείας, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο επαγγελματία πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της CC Athletics.

Η CC Athletics δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα από τη χρήση του PlateMate.

10. Νομικές πληροφορίες και εγγύηση

Εγγύηση

Τα προϊόντα της CC Athletics συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών, ενώ μπορείτε επίσης να αγοράσετε επέκταση της εγγύησης. Οι πλήρεις όροι περιλαμβάνονται στους όρους συναλλαγών μας, στη διεύθυνση ccathletics.com/trading-conditions. Η εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

Για αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση sales@ccathletics.dk, αποστέλλοντας περιγραφή του προβλήματος και το αποδεικτικό αγοράς.

Πολιτική σέρβις

Αναγνωρίζετε ότι, κάθε φορά που το προϊόν σας της CC Athletics υποβάλλεται σε σέρβις, το σέρβις αυτό ενδέχεται να αλλάξει τις ρυθμίσεις σας ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή

ορισμένων λειτουργιών. Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας (που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή στο cloud).

Πληροφορίες εισαγωγής/εξαγωγής

Χώρα προέλευσης

- PlateMate: Κατασκευάζεται στη Δανία
- GroinMate: Κατασκευάζεται στη Δανία
- CableMate: Κατασκευάζεται στη Δανία

Στοιχεία τελωνειακής διασάφησης

- Περιγραφή προϊόντος: «Εξοπλισμός μέτρησης δύναμης για δοκιμασίες αθλητικής απόδοσης»
- Τελική χρήση: Εξοπλισμός μέτρησης αθλητικής απόδοσης
- Δεν προορίζεται για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία

11. Συμμόρφωση

Σήμανση CE

Το PlateMate φέρει σήμανση CE. Συμμορφώνεται με την οδηγία EMC 2014/30/EE και την οδηγία RoHS 2011/65/EE, όπως τροποποιήθηκε από την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2015/863.


Οδηγία RoHS 2011/65/EE

Το PlateMate συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS 2011/65/EE. Δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά, όπως μόλυβδο (Pb), υδράργυρο (Hg), κάδμιο (Cd), εξασθενές χρώμιο (Cr6+), πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (PBDE), πέραν των αποδεκτών ορίων. Όλα τα εξαρτήματα έχουν αξιολογηθεί ως προς τη συμμόρφωση και δεν χρησιμοποιείται καμία περιορισμένη ουσία σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζει η οδηγία.

Πολιτική για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή

οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα WEEE απαιτεί την ορθή απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όταν αυτός φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου υποδεικνύει ότι τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα απόβλητα· πρέπει να παραδίδονται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την απόρριψη συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και διασφαλίζει ότι το προϊόν ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

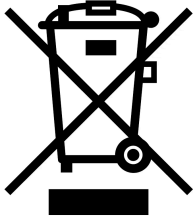

Δήλωση συμμόρφωσης FCC

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε λαμβανόμενη

παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προσοχή: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Δήλωση συμμόρφωσης του προμηθευτή (47 CFR § 2.1077)

Προϊόν: PlateMate

Κατασκευαστής: CC Athletics, Grønlokkevej 6H, Odense, Denmark

Υπεύθυνο μέρος (υπεύθυνος επικοινωνίας στις ΗΠΑ): Testing Partners LLC, 18200 SR 306, Chagrin Falls, OH 44023, info@testingpartners.com

Το PlateMate συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του Μέρους 15 των Κανόνων της FCC.

12. Επικοινωνία και υποστήριξη

CC Athletics ApS

Groenloekkevej 6H, 5000 Odense C, Denmark

- Γενικές πληροφορίες: info@ccathletics.dk
- Υποστήριξη: support@ccathletics.dk
- Ιστότοπος: ccathletics.com
- Βίντεο για τα πρώτα βήματα: ccathletics.com/getting-started

Σας ευχόμαστε ακριβή αποτελέσματα και επιτυχημένες δοκιμές.

Η ομάδα της CC Athletics