

# Naudotojo vadovas

PlateMate, GroinMate ir CableMate

Redakcija 6 · Paskutinė redakcija: 2026 m. spalio 12 d.

**Gamintojas:** CC Athletics ApS, Groenloekkevej 6H, 5000 Odense C, Denmark

---

## Turinys

1. Įvadas
2. Apie mus
3. Svarbi saugos informacija
4. Įspėjimai ir atsargumo priemonės
5. Bendrosios naudojimo sąlygos
6. Kalibravimas
7. Gaminių apžvalga
  - 7.1 PlateMate
  - 7.2 GroinMate
  - 7.3 CableMate
8. Darbo pradžia
9. Trikčių šalinimas
10. Teisinė informacija ir garantija
11. Atitiktis
12. Kontaktai ir pagalba

---

Šis vadovas skirtas CC Athletics gaminiams. Visa jame pateikta informacija priklauso CC Athletics ir skirta tik CC Athletics įrangai ir programinei įrangai naudoti. Atkreipiame dėmesį, kad šis vadovas gali būti atnaujinamas. Naujausią versiją rasite adresu [ccathletics.com/manual](https://ccathletics.com/manual).

# 1. Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote CC Athletics gaminį. Mūsų technologija sukurta tam, kad padėtų kineziterapeutams, sporto komandoms ir sportinio rengimo specialistams greitai ir efektyviai rinkti tikslius ir pakartojamus duomenis. Šiame vadove pateikiamos originalios instrukcijos kartu su atnaujintomis techninėmis specifikacijomis, atitiktis informacija ir naudotojo nurodymais iš naujausių mūsų gaminių linijų.

Minimalūs reikalavimai: kompiuteris su macOS arba Windows operacine sistema.

## 2. Apie mus

CC Athletics – Danijos įmonė, kurianti jėgos platformas ir izometrinę įrangą sportininkų būklei stebėti.

## 3. Svarbi saugos informacija

### ⚠ Liekamieji pavojai

Net ir naudojant pagal paskirtį, kai kurių pavojų visiškai pašalinti neįmanoma. Jie vadinami liekamaisiais pavojais.

Liekamųjų pavojų pavyzdžiai:

- Apvirtimas: pastačius platformas ant nelygaus paviršiaus, jos gali apvirsti, o tai gali sukelti sužalojimą.
- Paslydimas: jei naudotojai avi slidžią avalynę, dėvi slidžius drabužius arba yra basi, testavimo metu jie gali paslysti, nukristi ir susižaloti. Gaminiai taip pat gali slysti, jei jie nepastatyti ant neslidaus paviršiaus.
- Konstrukcijos vientisumas: numetus gaminius arba paveikus juos per didelę jėgą, gali būti pažeisti vidiniai komponentai, o dėl to gali sugesti įranga arba galima susižaloti.
- Odos pažeidimai: tiesioginis sąlytis su metaliniais kraštais arba staigūs judesiai testavimo metu gali sukelti nubrozdinimų ar kitų sužalojimų.

### **⚠ Nenaudokite šiais atvejais:**

- Pacientams, sergantiems sunkia osteoporoze
- Pacientams, turintiems lūžių
- Nenaudokite ten, kur grindys slidžios
- Nenaudokite lauke, kai lyja
- Nenaudokite, jei gaminys buvo modifikuotas
- Negalima naudoti jokių kitų tikslų, nei nurodyta

### **Svarbus atsakomybės apribojimas: tai nėra medicinos priemonė**

CC Athletics gaminiai nėra medicinos priemonės. Jie skirti tik sportinių rezultatų stebėsenai, jėgos testavimui ir su sportu susijusiems vertinimams. Šie gaminiai nėra skirti jokiai ligai ar sveikatos būklei diagnozuoti, gydyti, išgydyti ar jos išvengti. Prieš naudodami šiuos gaminius bet kokioje klinikinėje ar reabilitacijos aplinkoje, visada pasitarkite su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

## 4. Įspėjimai ir atsargumo priemonės

### Svarbūs naudojimo nurodymai:

- Naudokite tik ant lygių, stabilių paviršių.
- Šį prietaisą turėtų naudoti tik apmokyti specialistai, išmanantys jo naudojimą ir apribojimus.
- Naudotojai, turintys fizinių ar kognityvinių sutrikimų, neturėtų naudoti gaminių, nebent tai daroma prižiūrint apmokytam specialistui.
- Nėra žinoma, kad šiuose prietaisuose būtų pavojingų medžiagų. Dėl tinkamo šalinimo nurodymų kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę. Jei yra galimybė, prietaisus reikėtų perdirbti. Nešalinkite prietaisų juos deginant.
- Prietaisai nėra atsparūs vandeniui.
- Matavimo prietaisai yra jautrūs instrumentai. Venkite juos numesti, trankyti ar kaip nors kitaip paveikti smūgiais. Elkitės su jais atsargiai. Dėl kritimų ar staigių smūgių gali prireikti pakartotinio kalibravimo.
- Prietaisai ir jų priedai tiekiami nesterilūs, jų negalima sterilizuoti autoklave ar kitais sterilizavimo būdais. Nebandykite jų sterilizuoti autoklave.
- Venkite ekstremalių temperatūrų ar didelės drėgmės.
- Naudokite tik sertifikuotus kabelius ir maitinimo šaltinius.
- Išardžius prietaisą arba jį modifikavus naudojant neleistinus priedus, gali nustoti galioti bet kokia garantija.
- Testavimo metu nejudinkite įrangos.
- CC Athletics prietaisus montuokite ir naudokite laikydamiesi šiame naudotojo vadove pateiktų nurodymų.

## 5. Bendrosios naudojimo sąlygos

- Naudoti tik patalpose arba lauke, kai sausa. CC Athletics prietaisus galima naudoti patalpose ir lauke, bet tik sausomis sąlygomis ir ant lygaus bei tvirto pagrindo. Naudodami prietaisus užtikrinkite, kad aplink jus būtų daug laisvos vietos.
- Išlyginkite prietaisą, reguliuodami reguliuojamų kojelių aukštį. Jei prietaisas stovi ant nelygaus paviršiaus, rezultatai gali būti klaidingi, o blogiausiu atveju galimi sužalojimai.
- Temperatūra: nuo -10 °C iki 40 °C (laikymas, pakavimas ir transportavimas), nuo 0 °C iki 50 °C (naudojimas).
- Drėgnis: nuo 30 % iki 75 %.
- Laikymas: kai gaminiai nenaudojami, laikykite juos sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
- Techninė priežiūra: gaminiams nenustatyta jokių planinės techninės priežiūros ar aptarnavimo reikalavimų.

## 6. Kalibravimas




Visi prietaisai yra sukalibruoti gamykloje. Jei kyla problemų, susisiekite su mumis:

[support@ccathletics.dk](mailto:support@ccathletics.dk)

## 7. Gaminių apžvalga

| Parametras                 | PlateMate                                                                             | GroinMate                                                        | CableMate                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Paskirtis</b>           | Šuolių ir izometrinis testavimas                                                      | Kirkšnies raumenų izometrinis addukcijos / abdukcijos testavimas | Izometrinis testavimas           |
| <b>Matmenys</b>            | 50 × 35 × 8 cm                                                                        | 60 × 40 × 16 cm                                                  | Kompaktiškas                     |
| <b>Svoris</b>              | 9,8 kg (viena platforma)                                                              | 5,4 kg                                                           | 0,7 kg                           |
| <b>Didžiausia apkrova</b>  | 4 000 kg vienai platformai (1 000 kg vienam apkrovos jutikliui)                       | 200 kg                                                           | 200 kg                           |
| <b>Tikslumas</b>           | ±0,15 N                                                                               | ±0,1 N                                                           | ±0,15 N                          |
| <b>Ėminių ėmimo dažnis</b> | 960 Hz                                                                                | 960 Hz                                                           | ~1 000 Hz                        |
| <b>Taikymas</b>            | CMJ, SJ, DJ, pogo šuoliai, pusiausvyra ir izometrija                                  | Izometrinis testavimas                                           | Izometrinis testavimas           |
| <b>Testų rodikliai</b>     | <a href="https://ccathletics.com/what-we-measure">ccathletics.com/what-we-measure</a> |                                                                  |                                  |
| <b>Maitinimas</b>          | Maitinamas per USB                                                                    | Maitinamas per USB                                               | Įkraunamas akumulatorius (USB-C) |
| <b>Veikimo trukmė</b>      | Visada maitinamas per USB                                                             | Visada maitinamas per USB                                        | ~8 val. vienu įkrovimu           |
| <b>Programinė įranga</b>   | ForceMate (Windows / macOS)                                                           | ForceMate (Windows / macOS)                                      | ForceMate (Windows / macOS)      |

| Parametras              | PlateMate | GroinMate | CableMate |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Įėjimo įtampa           | 5 V       | 5 V       | 5 V       |
| Srovė                   | ~400 mA   | ~140 mA   | ~500 mA   |
| 1 jungties tipas        | USB-B     | USB-B     | USB-C     |
| 2 jungties tipas        | RJ11      |           |           |
| Temperatūros intervalas | 0–50 °C   | 0–50 °C   | 0–50 °C   |

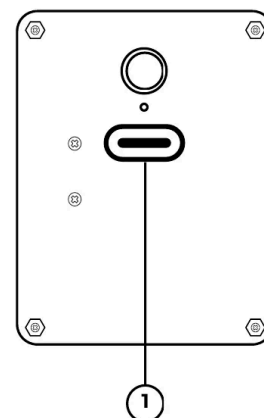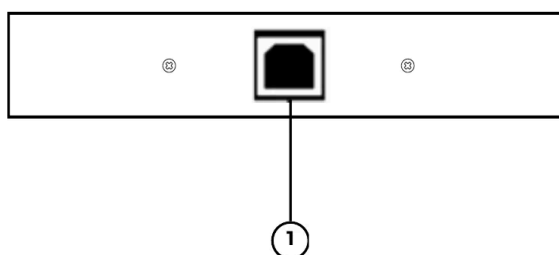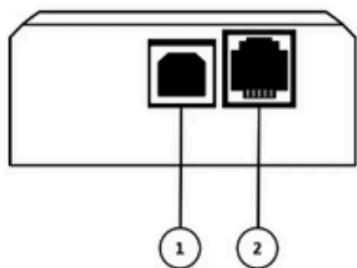

Jungtys iš kairės į dešinę: PlateMate, GroinMate, CableMate.

## 7.1 PlateMate

PlateMate – tai dviejų jėgos platformų sistema judesiams vertinti. Ji leidžia naudotojams atlikti objektyvius matavimus.

Šis gaminys skirtas naudoti apmokytiems specialistams, įskaitant kineziterapeutus, sporto trenerius ir sveikatos priežiūros specialistus. Jo neturėtų naudoti neapmokyti asmenys arba asmenys, turintys kognityvinę negalią, be priežiūros.

Tinka naudotojams nuo 8 metų. Jaunesni nei 18 metų naudotojai visada turi naudoti gaminį prižiūrint apmokytam specialistui. Visi naudotojai turi gebėti suprasti ir vykdyti nurodymus. Nerekomenduojama asmenims, neturintiems reikiamų fizinių gebėjimų.

Kiekvienoje platformoje įrengti 4 elektroniniai apkrovos jutikliai, kurių išvesties duomenis galima užfiksuoti kompiuteryje naudojant mūsų programinę įrangą ForceMate.

**Naudojimas:** atsisiųskite mūsų programinę įrangą ForceMate iš mūsų svetainės, kad galėtumėte fiksuoti ir vizualizuoti platformų duomenis. Svetainėje taip pat rasite mokomųjų vaizdo įrašų ir vadovų. Platformas galima naudoti atskirai arba kartu. Norėdami naudoti platformas dviejų platformų režimu, sujunkite jas jungiamuoju kabeliu. Atkreipkite dėmesį, kad perjungiant vienos platformos ir dviejų platformų režimus USB kabelį būtina ištraukti ir vėl įkišti, kad platformos būtų paleistos iš naujo ir galėtų atpažinti, ar prijungta kita platforma.

**Pakuotės turinys:**

- 2× jėgos platforma
- 1× USB-B į USB-C kabelis
- 1× platformų jungiamasis kabelis

## 7.2 GroinMate

GroinMate – tai testavimo prietaisas addukcijos ir abdukcijos jėgai testuoti. Jis leidžia naudotojams atlikti objektyvius matavimus.

Šis gaminys skirtas naudoti apmokytiems specialistams, įskaitant kineziterapeutus, sporto trenerius ir sveikatos priežiūros specialistus. Jo neturėtų naudoti neapmokyti asmenys arba asmenys, turintys kognityvinę negalią, be priežiūros.

Tinka naudotojams nuo 8 metų. Jaunesni nei 18 metų naudotojai visada turi naudoti gaminį prižiūrint apmokytam specialistui. Visi naudotojai turi gebėti suprasti ir vykdyti nurodymus. Nerekomenduojama asmenims, neturintiems reikiamų fizinių gebėjimų.

**Naudojimas:** atsisiųskite mūsų programinę įrangą ForceMate iš mūsų svetainės, kad galėtumėte fiksuoti ir vizualizuoti GroinMate duomenis. Prijunkite GroinMate prie kompiuterio ir pradėkite testavimą.

**Pakuotės turinys:**

- 1× GroinMate
- 1× USB-B į USB-C kabelis

## 7.3 CableMate

CableMate – tai universalus prietaisas, leidžiantis matuoti daugelio skirtingų raumenų grupių generuojamą jėgą. Jis leidžia naudotojams atlikti objektyvius matavimus.

Šis gaminys skirtas naudoti apmokytiems specialistams, įskaitant kineziterapeutus, sporto trenerius ir sveikatos priežiūros specialistus. Jo neturėtų naudoti neapmokyti asmenys arba asmenys, turintys kognityvinę negalią, be priežiūros.

Tinka naudotojams nuo 8 metų. Jaunesni nei 18 metų naudotojai visada turi naudoti gaminį prižiūrint apmokytam specialistui. Visi naudotojai turi gebėti suprasti ir vykdyti nurodymus. Nerekomenduojama asmenims, neturintiems reikiamų fizinių gebėjimų.

**Naudojimas:** atsisiųskite mūsų programinę įrangą ForceMate iš mūsų svetainės, kad galėtumėte fiksuoti ir vizualizuoti CableMate duomenis. Belaidžiu ryšiu prijunkite CableMate prie kompiuterio ir pradėkite testavimą.

**Pakuotės turinys:**

- 1× CableMate
- 1× USB-C kabelis
- 1× transportavimo lagaminas
- 2× karabinai
- 1× 1 m diržas tempimo testams
- 1× 2 m diržas tempimo testams

## CableMate akumulatoriaus sauga ir taisyklės

### Akumulatoriaus specifikacijos

CableMate viduje yra ličio polimerų (LiPo) akumuliatorių blokas:

- Modelis: 503450
- Įtampa: 3,7 V
- Talpa: 1 000 mAh

### **⚠ Akumulatoriaus saugos įspėjimai**

- Gaisro / sprogimo pavojus: nepradurkite, nesutraiškyskite, neardykite akumulatoriaus ir nelaikykite jo aukštesnės nei 60 °C (140 °F) temperatūros aplinkoje.
- Įkrovimas: naudokite tik pridėtą USB-C kabelį ir patvirtintus įkrovimo adapterius.
- Vandens padaryta žala: akumulatoriaus skyrių laikykite sausą. Sąlytis su skysčiu gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- Fiziniai pažeidimai: jei prietaisas buvo numestas arba pažeistas, nebenaudokite jo ir kreipkitės į CC Athletics.
- Išsipūtimas: jei akumulatorius atrodo išsipūtęs arba prietaiso korpusas išsigaubęs, nedelsdami nutraukite naudojimą.
- Įkaitimas: jei įkraunant ar naudojant prietaisas neįprastai įkaista, nedelsdami jį atjunkite.

### **Akumulatoriaus šalinimas ir perdirbimas**

- Neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.
- Pristatykite į įgaliotus baterijų ir akumuliatorių perdirbimo centrus arba ličio akumuliatorius priimančias elektronikos prekybos vietas.
- ES šalinimas turi atitikti WEEE direktyvą 2012/19/ES.
- Dėl tinkamų šalinimo vietų kreipkitės į vietos atliekų tvarkymo instituciją.
- Prieš šalindami užklijuokite akumulatoriaus gnybtus lipnia juosta, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.

## **8. Darbo pradžia**

Vadovaukitės greitosios pradžios vadovais, pateiktais adresu [ccathletics.com/getting-started](https://ccathletics.com/getting-started).

### **Prieš naudodami jėgos platformas:**

- Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas ant stabilaus ir lygaus paviršiaus.
- Įsitikinkite, kad reguliuojamos kojelės sureguliuotos taip, kad jėgos platformos stovėtų lygiai.
- Įsitikinkite, kad erdvė aplink prietaisą laisva, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

### **Prieš naudodami bet kurį gaminį:**

- Įsitikinkite, kad erdvė aplink prietaisą laisva, kad testuojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Kiekviename prietaise yra prievadas (1), skirtas prijungti prie kompiuterio. PlateMate turi jungties prievadą (2), skirtą prijungti prie kitos platformos jungiamuoju kabeliu. Programinėje įrangoje prie kompiuterio prijungtas prietaisas visada bus kairysis prietaisas.

GroinMate ir PlateMate maitinami tik per USB kabelį. Prijungti prietaisai įsijungia per 10 sekundžių. CableMate maitinamas akumuliatoriumi. Būtinai jį dažnai įkraukite, kad akumuliatorius ilgiau išliktų geros būklės.

Prieš atliekant šuolį ant jėgos platformų, taip pat tarp šuolių, svarbu ramiai pastovėti bent 2–5 sekundes. To nesilaikant, duomenys gali būti netikslūs.

**⚠ Įspėjimas:** kol prietaisas jungiamas, jo neapkraukite, ant jo nelipkite, jo nejudinkite ir neveikite jo jėga.

## 9. Trikčių šalinimas

| Problema                              | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginys neaptinkamas                | Iš naujo paleiskite programinę įrangą ir dar kartą patikrinkite kabelio jungtį.                                                                                                                                                                                                                               |
| Nepastovūs duomenys arba duomenų nėra | Užtikrinkite, kad paviršius būtų lygus ir paleidimo metu nebūtų jokio judėjimo. Atliekate izometrinį testavimą? Būtinai sureguliuokite minimalią slenkstinę vertę programoje ForceMate. Mokomąją medžiagą rasite mūsų YouTube kanale: <a href="https://youtube.com/@ccathletics">youtube.com/@ccathletics</a> |
| Neįsijungia                           | Įkraukite įrenginį (CableMate) arba patikrinkite kabelio jungtį (PlateMate ir GroinMate).                                                                                                                                                                                                                     |
| Programinės įrangos problemos         | Įdiekite programinę įrangą iš naujo arba patikrinkite sistemos suderinamumą. Taip pat įsitikinkite, kad esate atsisiuntę naujausią versiją.                                                                                                                                                                   |
| CableMate problemos                   | Norėdami atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, 10 sekundžių laikykite nuspaudę mygtuką.                                                                                                                                                                                                                      |

Jei naudojant sistemą kyla kokių nors sunkumų, apsilankykite CC Athletics svetainėje, kurioje rasite daugiau informacijos, arba susisieki su CC Athletics.

### ⚠ Įspėjimas:

Gaminiai turi būti naudojami pagal šį naudotojo vadovą ir jame pateiktas rekomendacijas. To nesilaikant, galima patirti asmens sužalojimų.

Naudotojai atsako už tai, kaip jie atlieka pratimus ir kaip naudoja gaminius. CC Athletics propaguojami judesiai gali būti susiję su sužalojimo rizika.

Reguliariai tikrinkite CC Athletics svetainėje pateikiamą informaciją apie su PlateMate susijusias kontraindikacijas, riziką ar šalutinį poveikį. CC Athletics neteikia patarimų dėl gydymo ir nenustato jokių medicininių diagnozių.

Jei šiuo metu vartojate vaistus, esate patyrę traumą arba jūsų sveikatos būklė yra trapi, prieš naudodami bet kurį CC Athletics gaminį pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.

CC Athletics negarantuoja jokio terapinio rezultato naudojant PlateMate.

## 10. Teisinė informacija ir garantija

### Garantija

CC Athletics gaminiais suteikiama 2 metų garantija, taip pat galima įsigyti pratęstą garantiją. Visos sąlygos pateiktos mūsų prekybos sąlygose adresu [ccathletics.com/trading-conditions](https://ccathletics.com/trading-conditions). Garantija neturi įtakos jūsų, kaip vartotojo, įstatymais nustatytoms teisėms.

Dėl garantinių pretenzijų kreipkitės adresu [sales@ccathletics.dk](mailto:sales@ccathletics.dk), pateikdami problemos aprašymą ir pirkimą patvirtinantį dokumentą.

### Techninio aptarnavimo politika

Jūs pripažįstate, kad kiekvieną kartą atliekant jūsų CC Athletics gaminio techninį aptarnavimą gali būti pakeisti jūsų nustatymai arba prarasti duomenys ar kai kurios funkcijos. Reguliariai darykite atsargines savo duomenų (saugomų jūsų kompiuteryje arba debesyje) kopijas.

### Importo ir eksporto informacija

#### Kilmės šalis

- PlateMate: pagaminta Danijoje
- GroinMate: pagaminta Danijoje
- CableMate: pagaminta Danijoje

#### Muitinės deklaracijos informacija

- Gaminio aprašymas: „Jėgos matavimo įranga sportiniam pajėgumui testuoti“
- Galutinis naudojimas: sportinio pajėgumo matavimo įranga
- Neskirta medicininei diagnostikai ar gydymui

## 11. Atitiktis

### CE ženklavimas


PlateMate paženklintas CE ženklu. Jis atitinka EMC direktyvą 2014/30/ES ir RoHS direktyvą 2011/65/ES su pakeitimais, padarytais Deleguotąja direktyva (ES) 2015/863.

## RoHS direktyva 2011/65/ES

PlateMate atitinka RoHS direktyvą 2011/65/ES. Jame nėra pavojingų medžiagų, tokių kaip švinas (Pb), gyvsidabris (Hg), kadmis (Cd), šešiavalentis chromas (Cr6+), polibrominti bifenilai (PBB) ar polibrominti difenileteriai (PBDE), kiekiais, viršijančiais leistinas ribas. Visų komponentų atitiktis įvertinta, ir nenaudojama jokių ribojamų medžiagų, kurių koncentracija viršytų direktyvoje nustatytas ribines vertes.

## Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) politika

Šiame skyriuje pateikiama informacija naudotojams Europos Sąjungoje apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimą. Europos direktyva 2012/19/ES dėl WEEE reikalauja tinkamai šalinti elektros ir elektroninę įrangą, kai baigiasi jos eksploatavimo laikas. Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad šių gaminių negalima šalinti kartu su kitomis atliekomis; pagal vietos teisės aktus juos būtina pristatyti į patvirtintą apdorojimo įmonę arba į perdirbimui skirtą surinkimo punktą. Atskiras elektroninės įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas jų šalinimo metu padeda tausoti gamtos išteklius ir užtikrina, kad gaminys būtų perdirbtas žmonių sveikatą ir aplinką saugančiu būdu.

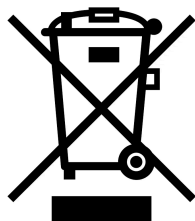

## FCC atitikties pareiškimas

*Pastaba:* ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, o jei ji įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingųjų radijo ryšio trukdžių. Tačiau negarantuojama, kad konkrečiu įrengimo atveju trukdžių nebus. Jei ši įranga vis dėlto sukelia žalingųjų radijo ar televizijos signalo priėmimo trukdžių (tai galima nustatyti išjungiant ir vėl įjungiant įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- Pakeiskite priimančiosios antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos elektros grandinės lizdo nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.

- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

*Dėmesio:* pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šią įrangą.

## Tiekėjo atitikties deklaracija (47 CFR § 2.1077)

Gaminys: PlateMate

Gamintojas: CC Athletics, Grønløkkevej 6H, Odense, Denmark

Atsakingoji šalis (kontaktinis asmuo JAV): Testing Partners LLC, 18200 SR 306, Chagrin Falls, OH 44023, [info@testingpartners.com](mailto:info@testingpartners.com)

PlateMate atitinka taikomus FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus.

## 12. Kontaktai ir pagalba

CC Athletics ApS

Groenloekkevej 6H, 5000 Odense C, Denmark

- Bendra informacija: [info@ccathletics.dk](mailto:info@ccathletics.dk)
- Techninė pagalba: [support@ccathletics.dk](mailto:support@ccathletics.dk)
- Svetainė: [ccathletics.com](http://ccathletics.com)
- Vaizdo įrašai apie darbo pradžią: [ccathletics.com/getting-started](http://ccathletics.com/getting-started)

Linkime tikslių rezultatų ir sėkmingo testavimo.

### CC Athletics komanda