

Lietotāja rokasgrāmata

PlateMate, GroinMate un CableMate

Redakcija 6 · Pēdējoreiz pārskatīts: 2026. gada 12. oktobris

Ražotājs: CC Athletics ApS, Groenloekkevej 6H, 5000 Odense C, Denmark

Saturs

1. Ievads
2. Par mums
3. Svarīgs drošības paziņojums
4. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
5. Vispārīgie ekspluatācijas apstākļi
6. Kalibrēšana
7. Izstrādājumu pārskats
 - 7.1 PlateMate
 - 7.2 GroinMate
 - 7.3 CableMate
8. Darba sākšana
9. Problēmu novēršana
10. Juridiskā informācija un garantija
11. Atbilstība
12. Kontakti un atbalsts

Šī rokasgrāmata attiecas uz CC Athletics izstrādājumiem. Visa tajā ietvertā informācija pieder CC Athletics un ir paredzēta vienīgi CC Athletics aprīkojuma un programmatūras lietošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka šī rokasgrāmata var tikt atjaunināta. Jaunākā versija ir pieejama vietnē ccathletics.com/manual.

1. Ievads

Paldies, ka iegādājāties CC Athletics produktu. Mūsu tehnoloģija ir izstrādāta, lai palīdzētu fizioterapeitiem, sporta komandām un sportiskā snieguma speciālistiem ātri un efektīvi iegūt precīzus un atkārtojamus datus. Šajā lietotāja rokasgrāmatā oriģinālās instrukcijas ir apvienotas ar mūsu jaunāko produktu līniju atjauninātajām specifikācijām, atbilstības informāciju un norādījumiem lietotājiem.

Minimālās prasības: dators ar macOS vai Windows operētājsistēmu.

2. Par mums

CC Athletics ir Dānijas uzņēmums, kas izstrādā spēka platformas un izometrisko aprīkojumu sportistu uzraudzībai.

3. Svarīgs drošības paziņojums

Atlikušie apdraudējumi

Pat lietojot izstrādājumus paredzētajam nolūkam, dažus apdraudējumus nav iespējams pilnībā novērst. Tos sauc par atlikušajiem apdraudējumiem.

Atlikušo apdraudējumu piemēri:

- Apgāšanās: ja spēka platformas ir novietotas uz nelīdzenas virsmas, tās var apgāzties, un tas var izraisīt traumas.
- Paslīdēšana: ja lietotāji valkā slidenus apavus vai apģērbu vai ir basām kājām, viņi testēšanas laikā var paslīdēt, kas var izraisīt kritienus un traumas. Arī paši izstrādājumi var slīdēt, ja tie nav novietoti uz neslidenas virsmas.
- Konstrukcijas integritāte: izstrādājumu nomešana vai pārmērīga spēka pielikšana var sabojāt iekšējos komponentus, izraisot aprīkojuma atteici vai traumas.
- Ādas bojājumi: tieša saskare ar metāla malām vai straujas kustības testēšanas laikā var izraisīt nobrāzumus vai citas traumas.

⚠ Nelietot šādos apstākļos:

- Pacientiem ar smagu osteoporozi
- Pacientiem ar lūzumiem
- Nelietot slidenu grīdu tuvumā
- Nelietot ārā lietus laikā
- Nelietot, ja izstrādājums ir pārveidots
- Nelietot nekādiem citiem mērķiem, izņemot norādītos

Svarīga atbilde: nav medicīniska ierīce

CC Athletics izstrādājumi nav medicīniskas ierīces. Tie ir paredzēti tikai snieguma uzraudzībai, spēka testēšanai un ar sportu saistītiem novērtējumiem. Šie izstrādājumi nav paredzēti nekādu slimību vai veselības stāvokļu diagnosticēšanai, ārstēšanai, izārstēšanai vai novēršanai. Pirms šo izstrādājumu lietošanas jebkādā klīniskā vai rehabilitācijas vidē vienmēr konsultējieties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

4. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Svarīgi norādījumi par apiešanos ar ierīcēm:

- Lietojiet tikai uz līdzenām, stabilām virsmām.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai apmācīti speciālisti, kuri izprot tās lietošanu un ierobežojumus.
- Lietotāji ar fiziskiem vai kognitīviem traucējumiem nedrīkst lietot izstrādājumus, ja vien tas nenotiek apmācīta speciālista uzraudzībā.
- Nav zināms, ka šīs ierīces saturētu bīstamus materiālus. Lai saņemtu norādījumus par pareizu utilizāciju, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Ja ir pieejama pārstrāde, tā jāizmanto. Ierīces nedrīkst utilizēt, tās sadedzinot.
- Ierīces nav ūdensnecaurīdīgas.
- Mērierīces ir jutīgi instrumenti. Izvairieties no to nomešanas, sišanas pa tām vai pakļaušanas jebkādiem triecieniem. Rīkojieties ar tām uzmanīgi. Pēc nokrišanas vai pēkšņiem triecieniem var būt nepieciešama atkārtota kalibrēšana.
- Ierīces un to piederumi tiek piegādāti nesterili, un tos nevar sterilizēt autoklāvā vai ar citām sterilizācijas metodēm. Nemēģiniet tos apstrādāt autoklāvā.
- Izvairieties no ekstremālām temperatūrām vai augsta mitruma.
- Izmantojiet tikai sertificētus kabelus un barošanas avotus.
- Ierīces izjaukšana vai pārveidošana, izmantojot neatļautus piederumus, var anulēt jebkādu garantiju.
- Nepārvietojiet aprīkojumu testēšanas laikā.
- Uzstādiet un lietojiet CC Athletics ierīces saskaņā ar šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

5. Vispārīgie ekspluatācijas apstākļi

- Lietot tikai telpās vai sausos apstākļos ārpus telpām. CC Athletics ierīces var lietot gan telpās, gan ārpus telpām, taču tikai sausos apstākļos uz līdzenas un stingras pamatnes. Lietojot ierīces, pārliecinieties, ka jums apkārt ir pietiekami daudz brīvas vietas.
- Lai novietotu ierīci līmeniski, noregulējiet regulējamo kājiņu augstumu. Ja ierīce atrodas uz virsmas, kas nav līmeniska, rezultāti var būt kļūdaini, un sliktākajā gadījumā var rasties traumas.
- Temperatūra: no -10 °C līdz 40 °C (glabāšana, iepakojšana un transportēšana), no 0 °C līdz 50 °C (lietošana).
- Mitrums: no 30 % līdz 75 %.
- Glabāšana: kad izstrādājumi netiek lietoti, glabājiet tos sausā vietā, kur nav putekļu.
- Apkope: izstrādājumiem nav plānotas apkopes vai servisa prasību.

6. Kalibrēšana




Visas ierīces ir rūpnīcā kalibrētas. Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums:

support@ccathletics.dk

7. Izstrādājumu pārskats

Parametrs	PlateMate	GroinMate	CableMate
Mērķis	Lēcienu testēšana un izometriskā testēšana	Cirkšņa muskuļu izometriskā addukcijas/abdukcijas testēšana	Izometriskā testēšana
Izmēri	50 × 35 × 8 cm	60 × 40 × 16 cm	Kompakts
Svars	9,8 kg katrai platformai	5,4 kg	0,7 kg
Maks. slodze	4 000 kg katrai platformai (1 000 kg katram slodzes devējam)	200 kg	200 kg
Precizitāte	±0,15 N	±0,1 N	±0,15 N
Nolases frekvence	960 Hz	960 Hz	~1 000 Hz
Lietojuma piemēri	CMJ, SJ, DJ, pogo lēcieni, līdzsvars un izometrija	Izometriskā testēšana	Izometriskā testēšana
Testu rādītāji	ccathletics.com/what-we-measure		
Barošanas avots	Barošana no USB	Barošana no USB	Uzlādējams akumulators (USB-C)
Darbības laiks	Pastāvīga barošana no USB	Pastāvīga barošana no USB	~8 h ar vienu uzlādi
Programmatūra	ForceMate (Windows/macOS)	ForceMate (Windows/macOS)	ForceMate (Windows/macOS)

Parametrs	PlateMate	GroinMate	CableMate
Ieejas spriegums	5 V	5 V	5 V
Strāva	~400 mA	~140 mA	~500 mA
1. savienojuma veids	USB-B	USB-B	USB-C
2. savienojuma veids	RJ11		
Temperatūras diapazons	0-50 °C	0-50 °C	0-50 °C

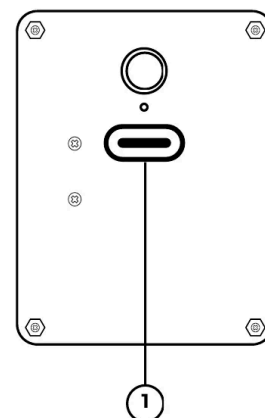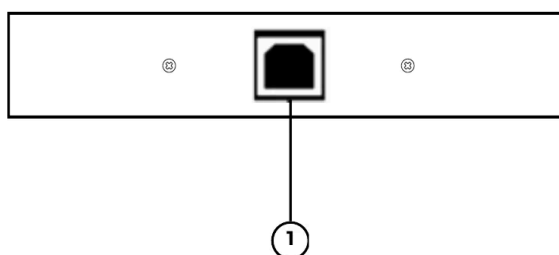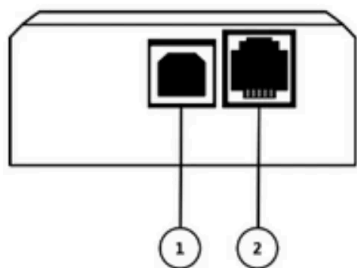

Savienojumi no kreisās uz labo pusi: PlateMate, GroinMate, CableMate.

7.1 PlateMate

PlateMate ir divu spēka platformu sistēma kustību novērtēšanai. Tā ļauj lietotājiem veikt objektīvus mērījumus.

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai apmācītiem speciālistiem, tostarp fizioterapeitiem, sporta treneriem un veselības aprūpes darbiniekiem. To nevajadzētu lietot neapmācītām personām vai personām ar kognitīviem traucējumiem bez uzraudzības.

Piemērots lietotājiem no 8 gadu vecuma. Lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, vienmēr jābūt apmācīta speciālista uzraudzībā. Visiem lietotājiem jāspēj saprast un ievērot norādījumus. Nav ieteicams personām, kurām trūkst nepieciešamo fizisko spēju.

Katra platforma ir aprīkota ar 4 elektroniskiem slodzes devējiem, kuru izejas signālu var reģistrēt jūsu datorā, izmantojot mūsu programmatūru ForceMate.

Lietošana: lejupielādējiet mūsu programmatūru ForceMate no mūsu tīmekļa vietnes, lai reģistrētu un vizualizētu platformu datus. Tīmekļa vietnē atradīsiet arī video pamācības un norādījumus. Platformas var izmantot atsevišķi vai kopā. Lai platformas izmantotu divu platformu režīmā, savienojiet tās ar savienotājkabeli. Ņemiet vērā, ka, pārslēdzoties starp vienas platformas un divu platformu režīmu, USB kabelis ir jāatvieno un jāpievieno no jauna, lai platformas atiestatītu un tās varētu noteikt, vai ir pievienota otra platforma.

Komplektācija:

- 2× spēka platforma
- 1× kabelis USB-B uz USB-C
- 1× platformu savienotājkabelis

7.2 GroinMate

GroinMate ir testēšanas ierīce addukcijas un abdukcijas spēka testēšanai. Tā ļauj lietotājiem veikt objektīvus mērījumus.

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai apmācītiem speciālistiem, tostarp fizioterapeitiem, sporta treneriem un veselības aprūpes darbiniekiem. To nevajadzētu lietot neapmācītām personām vai personām ar kognitīviem traucējumiem bez uzraudzības.

Piemērots lietotājiem no 8 gadu vecuma. Lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, vienmēr jābūt apmācīta speciālista uzraudzībā. Visiem lietotājiem jāspēj saprast un ievērot norādījumus. Nav ieteicams personām, kurām trūkst nepieciešamo fizisko spēju.

Lietošana: lejupielādējiet mūsu programmatūru ForceMate no mūsu tīmekļa vietnes, lai reģistrētu un vizualizētu GroinMate datus. Pievienojiet GroinMate datoram un sāciet testēšanu.

Komplektācija:

- 1× GroinMate
- 1× kabelis USB-B uz USB-C

7.3 CableMate

CableMate ir daudzpusīga ierīce, ar kuru var izmērīt daudzu dažādu muskuļu grupu radīto spēku. Tā ļauj lietotājiem veikt objektīvus mērījumus.

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai apmācītiem speciālistiem, tostarp fizioterapeitiem, sporta treneriem un veselības aprūpes darbiniekiem. To nevajadzētu lietot neapmācītām personām vai personām ar kognitīviem traucējumiem bez uzraudzības.

Piemērots lietotājiem no 8 gadu vecuma. Lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, vienmēr jābūt apmācīta speciālista uzraudzībā. Visiem lietotājiem jāspēj saprast un ievērot norādījumus. Nav ieteicams personām, kurām trūkst nepieciešamo fizisko spēju.

Lietošana: lejupielādējiet mūsu programmatūru ForceMate no mūsu tīmekļa vietnes, lai reģistrētu un vizualizētu CableMate datus. Pievienojiet CableMate datoram bezvadu režīmā un sāciet testēšanu.

Komplektācija:

- 1× CableMate
- 1× USB-C kabelis
- 1× transportēšanas koferis
- 2× karabīnes
- 1× 1 m siksna stiepes testēšanai
- 1× 2 m siksna stiepes testēšanai

CableMate akumulatora drošība un noteikumi

Akumulatora specifikācijas

CableMate ir aprīkots ar litija polimēra (LiPo) akumulatoru:

- Modelis: 503450
- Spriegums: 3,7 V
- Ietilpība: 1000 mAh

⚠ Akumulatora drošības brīdinājumi

- Ugunsgrēka/sprādziena risks: nepārduriet, nesaspiediet, neizjauciet akumulatoru un nepakļaujiet to temperatūrai, kas pārsniedz 60 °C (140 °F).
- Uzlāde: izmantojiet tikai komplektā iekļauto USB-C kabeli un apstiprinātus lādēšanas adapterus.
- Ūdens radīti bojājumi: uzturiet akumulatora nodalījumu sausu. Saskare ar šķidrumu var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.
- Fiziski bojājumi: ja ierīce ir nokritusi vai bojāta, pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar CC Athletics.
- Uzbriešana: ja akumulators šķiet uzbriedis vai ierīces korpuss ir izliecies, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Sakaršana: ja uzlādes vai lietošanas laikā ierīce kļūst neparasti karsta, nekavējoties to atvienojiet.

Akumulatora utilizācija un pārstrāde

- Neizmetiet sadzīves atkritumos.
- Nododiet pilnvarotos akumulatoru pārstrādes centros vai elektronikas tirgotājiem, kas pieņem litija akumulatorus.
- ES teritorijā utilizācijai jāatbilst WEEE Direktīvai 2012/19/ES.
- Lai uzzinātu piemērotas utilizācijas vietas, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.
- Pirms utilizācijas aizlīmējiet akumulatora spaiļus ar līmlenti, lai novērstu īssavienojumu.

8. Darba sākšana

Izpildiet ātrās darba sākšanas pamācības vietnē ccathletics.com/getting-started.

Pirms spēka platformu lietošanas:

- Pārliedzinieties, ka ierīce ir novietota uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Pārliedzinieties, ka regulējamās kājiņas ir noregulētas tā, lai spēka platformas būtu nolīmeņotas.
- Pārliedzinieties, ka zona ap ierīci ir brīva, lai izvairītos no negadījumiem.

Pirms visu izstrādājumu lietošanas:

- Pārliedzinieties, ka zona ap ierīci ir brīva, lai testēšanas laikā izvairītos no negadījumiem.

Katra ierīce ir aprīkota ar pieslēgvietu (1) savienošanai ar datoru. PlateMate ir savienojuma pieslēgvietā (2) savienošanai ar otru platformu, izmantojot savienotājkabelli. Ierīce, kas ir pievienota datoram, programmatūrā vienmēr būs kreisā ierīce.

GroinMate un PlateMate barošana tiek nodrošināta tikai caur USB kabeli. Pēc pievienošanas ierīces ieslēdzas 10 sekunžu laikā. CableMate darbojas ar akumulatoru. Bieži to uzlādējiet, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku.

Pirms lēkšanas uz spēka platformām, kā arī starp lēcieniem ir svarīgi vismaz 2–5 sekundes stāvēt nekustīgi. Šī norādījuma neievērošana var radīt neprecīzus datus.

⚠ Brīdinājums: kamēr ierīce veido savienojumu, neslogojiet ierīci, nekāpiet uz ierīces, nepārvietojiet ierīci un nepielieciet ierīcei spēku.

9. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Ierīce netiek atpazīta	Restartējiet programmatūru un vēlreiz pārbaudiet kabeļa savienojumu.
Nepastāvīgi dati vai datu nav	Nodrošiniet, ka virsma ir līdzena un ierīces palaišanas laikā nenotiek nekādas kustības. Veicat izometrisko testēšanu? Noteikti pielāgojiet minimālo sliekšni programmatūrā ForceMate. Pamācības skatiet mūsu YouTube kanālā: youtube.com/@ccathletics
Neieslēdzas	Uzlādējiet ierīci (CableMate) vai pārbaudiet kabeļa savienojumu (PlateMate un GroinMate).
Programmatūras problēmas	Pārinstalējiet programmatūru vai pārbaudiet sistēmas saderību. Tāpat pārliecinieties, ka ir lejupielādēta jaunākā versija.
Problēmas ar CableMate	Lai veiktu rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, turiet pogu nospiestu 10 sekundes.

Ja sistēmas lietošanas laikā rodas kādas grūtības, apmeklējiet CC Athletics tīmekļa vietni, lai iegūtu plašāku informāciju, vai sazinieties ar CC Athletics.

Brīdinājums:

Izstrādājumi jālieto saskaņā ar šo lietotāja rokasgrāmatu un tajā sniegtajiem ieteikumiem. Šo prasību neievērošana var izraisīt traumas.

Lietotāji ir atbildīgi par to, kā viņi veic vingrinājumus un kā lieto izstrādājumus. CC Athletics popularizētās kustības var būt saistītas ar traumu risku.

Regulāri pārbaudiet CC Athletics tīmekļa vietnē pieejamo informāciju par kontraindikācijām, riskiem vai blakusparādībām saistībā ar PlateMate. CC Athletics nesniedz ārstēšanas ieteikumus un nenosaka nekādas medicīniskas diagnozes.

Ja pašlaik lietojat medikamentus, jums ir trauma vai jūsu veselības stāvoklis ir delikāts, pirms jebkura CC Athletics izstrādājuma lietošanas konsultējieties ar kvalificētu speciālistu.

CC Athletics negarantē nekādu terapeitisku rezultātu, lietojot PlateMate.

10. Juridiskā informācija un garantija

Garantija

CC Athletics produktiem ir 2 gadu garantija, un ir iespējams iegādāties pagarinātu garantiju. Pilni noteikumi ir izklāstīti mūsu tirdzniecības noteikumos vietnē ccathletics.com/trading-conditions. Garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Lai iesniegtu garantijas prasību, sazinieties ar sales@ccathletics.dk, norādot problēmas aprakstu un pievienojot pirkumu apliecinājošu dokumentu.

Servisa politika

Jūs atzīstat, ka ikreiz, kad jūsu CC Athletics produktam tiek veikts serviss, tas var mainīt jūsu iestatījumus vai izraisīt datu vai dažu funkciju zudumu. Regulāri veidojiet savu datu (kas tiek glabāti jūsu datorā vai mākonī) rezerves kopijas.

Importa/eksporta informācija

Izcelsmes valsts

- PlateMate: ražots Dānijā
- GroinMate: ražots Dānijā
- CableMate: ražots Dānijā

Muitas deklarācijas informācija

- Produkta apraksts: „Spēka mērīšanas aprīkojums sportiskā snieguma testēšanai”
- Galalietojums: sportiskā snieguma mērīšanas aprīkojums
- Nav paredzēts medicīniskai diagnostikai vai ārstēšanai

11. Atbilstība

CE marķējums


PlateMate ir CE marķējums. PlateMate atbilst EMC direktīvai 2014/30/ES un RoHS direktīvai 2011/65/ES, kas grozīta ar Deleģēto direktīvu (ES) 2015/863.

RoHS direktīva 2011/65/ES

PlateMate atbilst RoHS direktīvai 2011/65/ES. Tā nesatur tādas bīstamas vielas kā svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg), kadmījs (Cd), sešvērtīgais hroms (Cr6+), polibromētie bifēnili (PBB) vai polibromētie difenilēteri (PBDE) virs pieļaujamajām robežvērtībām. Visu sastāvdaļu atbilstība ir novērtēta, un neviena ierobežotā viela netiek izmantota koncentrācijā, kas pārsniedz direktīvā noteiktās robežvērtības.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) politika

Šajā sadaļā sniegta informācija par to, kā lietotājiem Eiropas Savienībā jāatbrīvojas no elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Eiropas Direktīva 2012/19/ES par WEEE prasa pienācīgi atbrīvoties no elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kad beidzies to kalpošanas laiks. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes uz riteņiem simbols norāda, ka šos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem; saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem tie jānodod apstiprinātā apstrādes uzņēmumā vai noteiktā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Elektronisko iekārtu atkritumu dalīta savākšana un otrreizēja pārstrāde, kad no tiem atbrīvojas, palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina, ka izstrādājums tiek pārstrādāts tā, lai tiktu aizsargāta cilvēku veselība un vide.

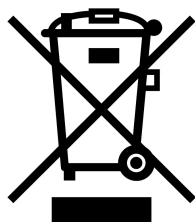

FCC atbilstības paziņojums

Piezīme: Šī iekārta ir testēta, un ir konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja iekārta ir uzstādīta dzīvojamā vidē. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā uzstādījumā traucējumi neradīsies. Ja šī iekārta tomēr rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas signāla uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Mainiet uztverošās antenas orientāciju vai novietojumu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Eksploatācijai jāatbilst šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav nepārprotami apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt šo iekārtu.

Piegādātāja atbilstības deklarācija (47 CFR § 2.1077)

Izstrādājums: PlateMate

Ražotājs: CC Athletics, Grønløkkevej 6H, Odense, Denmark

Atbildīgā puse (kontakta informācija ASV): Testing Partners LLC, 18200 SR 306, Chagrin Falls, OH 44023, info@testingpartners.com

PlateMate atbilst piemērojamajām FCC noteikumu 15. daļas prasībām.

12. Kontakti un atbalsts

CC Athletics ApS

Groenloekkevej 6H, 5000 Odense C, Denmark

- Vispārīga informācija: info@ccathletics.dk
- Atbalsts: support@ccathletics.dk
- Tīmekļa vietne: ccathletics.com
- Darba sākšanas video: ccathletics.com/getting-started

Vēlam jums precīzus rezultātus un veiksmīgu testēšanu.

CC Athletics komanda